

Gebruiksaanwijzing S34_Balance-Trainer





Beste klant,

Gefeliciteerd met de aanschaf van een hoogwaardig AIREX[®]-product!

Om ervoor te zorgen dat u zo lang mogelijk kunt genieten van de voordelen van onze AIREX[®]-schuimproducten, die onder CE-gecertificeerde omstandigheden worden geproduceerd, verzoeken wij u deze gebruiksaanwijzing te volgen.



Deze gebruiksaanwijzing wordt meegeleverd met de AIREX[®] Balance-Trainer die u hebt aangeschaft. De handleiding bevat onder andere belangrijke informatie over het beoogde gebruik. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of schade aan het product. Voor de leesbaarheid worden alle AIREX[®] Balance-Trainers hierna aangeduid als "Pads".



Wij verzoeken u vriendelijk om de veiligheidsinstructies en -richtlijnen zorgvuldig te lezen en op te volgen voordat u uw nieuwe pad voor de eerste keer gebruikt.



Raadpleeg altijd uw arts voordat u begint met een therapieprogramma met een "Pad" of dit wijzigt.

Deze gebruiksaanwijzing is gebaseerd op de normen en voorschriften die in de Europese Unie gelden. Bij gebruik van het product buiten de Europese Unie dient u ook de landspecifieke richtlijnen en wetgeving in acht te nemen. Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik. Wanneer u de pad aan iemand anders doorgeeft, geef dan ook deze gebruiksaanwijzing mee.

Heeft u nog vragen over dit of een ander product? Neem dan gerust contact met ons op.

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Fabrikantinformatie:

Airex AG

Industrie Nord 26

CH-5643 Sins

Zwitserland

Telefoon: +41 41 789 66 66

E-mail: info@my-airex.com

Web: www.my-airex.com

Informatie over de vertegenwoordiger (EU-REP)

3A Composites GmbH

Kiefernweg 10

DE-49090 Osnabrück

Duitsland

Telefoon: +49 7731 941 20 80

E-mail: info@my-airex.com

Copyright

Alle inhoud, afbeeldingen en teksten zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet – zelfs niet gedeeltelijk – zonder onze uitdrukkelijke toestemming worden gepubliceerd.

Gebruiksaanwijzing S34_Balance-Trainer_NL



Inhoudsopgave

Gebruiksaanwijzing S34_Balance-Trainer_NL.....	2
Algemene informatie.....	3
Algemene veiligheidsinformatie	6
Beoogd gebruik.....	6
Indicaties	6
Contra-indicaties.....	6
Voor het eerste gebruik	7
Veiligheidsinstructies	7
BeBalanced! Oefeningen.....	8
Technische gegevens.....	9
Eigenschappen.....	10
Onderhouds- en reinigingsinstructies	10
Optiek	10
Reiniging & desinfectie	10
Opslag	10
Hergebruik	10
Afvalverwerking	11
Aanvullende opmerkingen	11
Garantie & aansprakelijkheid	11
Beperking van aansprakelijkheid	11
Resterende risico's / bekende interacties	11
Contact.....	13

Deze handleiding helpt u vertrouwd te raken met uw nieuwe AIREX[®]-pad. U vindt hierin tips en aanwijzingen voor een veilig en betrouwbaar gebruik.

Algemene informatie

Voordat u het apparaat in gebruik neemt, dienen de gebruiker en de dealer deze instructies te lezen en te begrijpen. Deze gebruiksaanwijzing is ook beschikbaar als PDF-bestand (eGA) op onze website: <https://my-airex.com/downloads>. Zorg ervoor dat uw PDF-viewer up-to-date is, bijvoorbeeld Adobe Acrobat Reader XI.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met uw regionale dealer of ons team (+41 41 789 66 66).

Bij kinderen en personen met een motorische beperking moeten ouders of bevoegde verzorgers erop toezien dat de instructies in deze handleiding worden opgevolgd. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats.

Transport

Controleer bij ontvangst of de levering compleet en onbeschadigd is en inspecteer de pad op mogelijke transportschade.

Inhoud van de verpakking

1. AIREX® Balance-Trainer
2. BeBalanced! Trainingsprogramma voor het hele lichaam
3. Individuele verpakking
4. Elektronische gebruiksaanwijzing (eGA) als QR-code



Toepassingsgebied van deze gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing geldt voor de volgende AIREX® Balance-Trainers:

Handelsnaam:	Varianten:	EAN13	UDI-DI (EUDAMED)
AIREX® Balance-pad ca. 400 x 480 x 60 mm	Blauw	7613005009362	76130050093622
	Lava	7613005100915	76130051009158
AIREX® Balance-pad Solid ca. 410 x 460 x 50 mm	Koningsblauw	7613005093095	76130050930958
AIREX® Balance-pad Elite ca. 400 x 480 x 60 mm	Lava	7613005058421	76130050584212
	Kiwi	7613005067775	76130050677754
	Pink	7613005067782	76130050677822
	Blauw	7613005037273	76130050372734
AIREX® Balance-pad Cloud ca. 400 x 480 x 60 mm	Rood	7613005085984	76130050859846
	Olijf	7613005096904	76130050969040
AIREX® Balance-pad XLarge ca. 410 x 980 x 60 mm	Blauw	7613005047111	76130050471116
	Lava	7613005069557	76130050695574
AIREX® Balance-beam ca. 240 x 1600 x 60 mm	Blauw	7613005021869	76130050218698
	Lava	7613005100908	76130051009080
AIREX® Balance-beam Mini ca. 240 x 410 x 60 mm	Blauw	7613005077392	76130050773920
AIREX® Balance-pad Mini ca. 410 x 250 x 60 mm	Lava	7613005070263	76130050702630
AIREX® Balance-pad Mini Duo ca. 410 x 250 x 60 mm	Lava	7613005081191	76130050811912

Verpakking

Bewaar de productverpakking voor eventueel toekomstig transport. Als de pad onder garantie geretourneerd moet worden, gebruik dan indien mogelijk de originele doos.

Als u de verpakking niet bewaart, voer de verpakkingsmaterialen dan gescheiden af volgens het materiaaltype. Laat verpakkingsmaterialen niet onbeheerd achter, omdat deze gevaarlijk kunnen zijn.

Afvalverwerking

Voer de gebruikte materialen gescheiden af volgens het materiaaltype.

Opslag van het product

- Reinig de pad (zie pagina 11)
- Bescherm de pad tegen vervuiling (gebruik indien nodig de originele verpakking)
- Houd de pad uit de buurt van directe en gevaarlijke ontstekingsbronnen

Bij opslag onder normale omstandigheden, bij een temperatuur tussen +5 °C en +50 °C en een relatieve luchtvochtigheid van maximaal 70%, zal de pad niet chemisch ontleden of gevaarlijke veranderingen ondergaan. Vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht, omdat het oppervlak hierdoor broos en stijf kan worden.

Productbeschrijving en materiaal informatie

De AIREX[®]-pad is een comfortabel trainingshulpmiddel voor diverse therapeutische en trainingsdoeleinden. De pad is gemaakt van gesloten-cellig schuim (polyvinylchloride, PVC) met een zacht oppervlak. De pad is meestal rechthoekig of langwerpig en maakt veilige bewegingen mogelijk, zowel staand als tijdens oefeningen op de grond.

De pads zijn verkrijgbaar in verschillende vormen en kleuren, maar hebben dezelfde basisfunctie en kunnen voor dezelfde therapeutische doeleinden worden gebruikt. Ze zijn vooral geschikt als instabiele ondergrond voor coördinatie-, proprioceptie- en evenwichtsoefeningen. De AIREX[®] Balance-productlijn is speciaal ontwikkeld voor sensorimotorische coördinatie-training.

Combinaties met andere producten

AIREX[®]-pads vormen een integraal onderdeel van het sensorimotorische therapieconcept van de Balance-producten. In combinatie met andere AIREX[®]-producten kunnen ze als sensorimotorisch trainingshulpmiddel worden gebruikt. De dwarsgroeven bieden een goede slipweerstand en kunnen de moeilijkheidsgraad van oefeningen verhogen.

Melding van ernstige incidenten

Alle ernstige incidenten die verband houden met het product moeten onmiddellijk worden gemeld aan de fabrikant (info@my-airex.com) of diens gemachtigde vertegenwoordiger (EU-REP) en aan de bevoegde autoriteit van de betreffende lidstaat.

Uitleg van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze gebruiksaanwijzing gebruikt en kunnen ook op de AIREX®-pad of de verpakking voorkomen:

	Fabrikant Geeft de fabrikant van het medisch hulpmiddel aan		Temperatuurbependingen / -limiet Geeft de temperatuurlimieten aan waaraan het medisch product veilig kan worden blootgesteld
	Gemachtigde vertegenwoordiger in de EU Geeft de gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Unie aan		Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is Een medisch product mag niet gebruikt worden als de verpakking beschadigd is
	Fabricagedatum Geeft de datum aan waarop het medisch hulpmiddel is gefabriceerd		Volg de gebruiksaanwijzing Geeft aan dat de gebruiker de gebruiksaanwijzing moet raadplegen
	Batchcode Geeft de batchcode van de fabrikant aan, zodat de batch kan worden geïdentificeerd		Waarschuwing Om aan te geven dat voorzichtigheid geboden is bij het bedienen van het product in de buurt van het symbool
	Artikelnummer Geeft het artikelnummer van de fabrikant aan, zodat het medisch product kan worden geïdentificeerd		Medisch product / hulpmiddel Geeft aan dat het artikel een medisch hulpmiddel is
	Serienummer Geeft het serienummer van de fabrikant aan, zodat een specifiek medisch hulpmiddel kan worden geïdentificeerd		Vertaling Om aan te geven dat de originele informatie over het medisch hulpmiddel is vertaald
	Beschermen tegen zonlicht Geeft aan dat een medisch hulpmiddel bescherming tegen lichtbronnen nodig heeft		Deze kant boven
	Droog houden Geeft aan dat een medisch hulpmiddel bescherming tegen vocht nodig heeft		CE-markering CE-conformiteitsmarkering of CE-markering betekent een markering waarmee een fabrikant aangeeft dat een product voldoet aan de toepasselijke eisen
	Unieke identificatiecode Geeft een aanbieder aan die unieke productidentificatiegegevens bevat		Importeur Om de entiteit aan te duiden die het medisch hulpmiddel in de regio importeert
	PAP 20 – Golfkarton Het is een recyclingcode/logo dat aangeeft dat de verpakking is gemaakt van golfkarton.		Distributeur Om de entiteit aan te duiden die het medisch hulpmiddel in de regio distribueert



Algemene veiligheidsinformatie

Beoogd gebruik

De AIREX[®]-pad is bedoeld als hulpmiddel voor bewegingstherapie, zowel in instellingen als thuis. De op de vloer geplaatste pad ondersteunt de gebruiker bij medisch geïndiceerde en voorgeschreven oefeningen ter verbetering van de motoriek, het evenwicht en de houdingscontrole en bij de therapeutische behandeling van spierzwakte in de ledematen en romp als gevolg van een neurologische of orthopedische aandoening.

De pad bestaat uit geslotencellig schuim (polyvinylchloride, PVC) met een zacht oppervlak. De meestal rechthoekige of langwerpige vorm maakt veilige bewegingen mogelijk, zowel staand als tijdens therapeutische oefeningen op de grond.

HINWEIS!



Gebruik de AIREX[®]-pad uitsluitend voor het beoogde doel. Elk ander gebruik geldt als oneigenlijk en kan leiden tot materiële schade of persoonlijk letsel.

De AIREX[®]-pad is geen speelgoed. De pad is geschikt voor gebruik binnen en buiten.

Stel de AIREX[®]-pad tijdens opslag niet bloot aan extreme temperatuurschommelingen, hoge luchtvochtigheid of direct zonlicht. De optimale demping wordt bij kamertemperatuur bereikt. Bij lagere temperaturen neemt de demping af. De fabrikant en distributeur aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van oneigenlijk of niet-beoogd gebruik.

Indicaties

Neuromusculaire aandoeningen, degeneratieve en chronische aandoeningen van de wervelkolom, aandoeningen van het hart- en vaatstelsel.

Contra-indicaties

Hieronder staan bekende contra-indicaties die in het algemeen voor fysiotherapeutische oefeningen gelden. Bespreek deze altijd vooraf met de behandelend arts.

- Ernstige hypertensie (vanaf graad 3)
- Acute ontstekingen in de te behandelen gebieden
- De eerste 1–2 weken na een rugoperatie
- Ernstige rugklachten met neurologische symptomen
- Hartinsufficiëntie (NYHA III/IV) en inflammatoire hartaandoeningen
- Atherosclerose (perifeer arterieel vaatlijden, stadium III–IV)

Voor het eerste gebruik

Lees vóór het eerste gebruik van uw AIREX[®]-pad de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. De belangrijkste punten zijn hieronder samengevat.

HINWEIS!

Risico op beschadiging!

Als u de verpakking onvoorzichtig opent met een scherp mes of andere scherpe voorwerpen, kan de pad beschadigd raken. Ga voorzichtig te werk bij het openen van de verpakking:

1. Haal de pad uit de verpakking;
2. Controleer of de levering compleet is;
3. Controleer of de pad beschadigingen vertoont. Als dit het geval is, gebruik de pad dan niet en meld de schade bij uw verkoper.

Gebruik de pad alleen om te oefenen, nooit als ondergrond voor fitnessapparaten en - machines, omdat de speciale dempende eigenschappen van de pad een stabiele plaatsing van zware apparaten niet toelaten.

Train indien mogelijk op blote voeten, zodat het oppervlak van de pad niet beschadigd raakt.

Veiligheidsinstructies

WARNUNG

Risico op letsel!

Mogelijke gevaren voor kinderen en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of met onvoldoende ervaring en kennis (bijvoorbeeld personen met een beperking en ouderen met beperkte vermogens).

- Deze pad kan worden gebruikt door kinderen vanaf 6 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of onvoldoende ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan van medisch deskundig personeel of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik en de bijbehorende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet zonder toezicht met de pad spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.
- **Niet gebruiken als zwem- of reddingsmiddel. Gebruik de pad in water uitsluitend onder toezicht.**
- Houd kinderen jonger dan 3 jaar uit de buurt van de pad
- Zorg ervoor dat kinderen geen kleine onderdelen inslikken
- Laat kinderen niet met de verpakking spelen. Zij kunnen erin verstrikt raken, zich verwonden of stikken.

WARNUNG

Risico op letsel!

Onjuist gebruik van de pad kan letsel veroorzaken.

- Controleer voor elk gebruik of de pad in perfecte staat is
- Het lichaamsgewicht van de gebruiker mag niet meer dan 150 kg bedragen
- Gebruik de pad niet als het oppervlak of de structuur beschadigd is
- Verwijder eerst alle voorwerpen onder de pad die deze kunnen beschadigen
- Zorg ervoor dat de vloer of het zitvlak onder de pad vlak en antislip is. Leg indien nodig een AIREX[®]-gymmat onder de pad zodat deze niet zijdelings wegglijdt
- Zorg er bij het uitvoeren van oefeningen voor dat er voldoende ruimte is ten opzichte van

voorwerpen en andere personen en dat niemand gewond kan raken

- Voer geen oefeningen uit in de buurt van trappen of opstapjes
- Overschat uzelf niet tijdens het uitvoeren van oefeningen
- Raadpleeg eerst uw arts als u reeds bestaande aandoeningen heeft
- Als u tijdens de training pijn ervaart of onwel wordt, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg een arts
- Zorg ervoor dat iedereen die met de pad traint de veiligheidsinstructies heeft gelezen. Dit is vooral belangrijk voor personen met evenwichtsproblemen.

BeBalanced! Oefeningen

WARNUNG

Risico op letsel!

Onjuist trainen kan schadelijk zijn voor uw gezondheid. Zowel de gebruiker als de begeleider moet deze veiligheidsinstructies opvolgen. Raadpleeg bij bestaande aandoeningen eerst uw arts of therapeut.

- Doe vóór de training een lichte warming-up.
- Gebruik de pad bij een aangename kamertemperatuur.
- Draag comfortabele sportkleding en uitsluitend schone binnenschoenen, of train op blote voeten voor een betere proprioceptieve controle.
- De totale duur van een enkele trainingssessie mag 60 minuten niet overschrijden
- Drink voldoende tijdens de training.
- Overschrijd tijdens de training uw belastbaarheidsgrenzen niet.
- Adem rustig tijdens de training
- Vermijd snelle en heftige bewegingen tijdens de training. Concentreer u op uw evenwicht
- Stop onmiddellijk en raadpleeg een arts als u tijdens de training pijn of ongemak ervaart. Oefeningen met de pad ondersteunen een therapie, maar vervangen geen medisch of therapeutisch advies.

Technische gegevens

Typische waarden* voor AIREX® S34 van polyvinylchloride			Eenheid	S34.55	S34.60	S34.100
Volumieke massa		ISO 1183-1	kg/m³	55	60	110
Drukhardheid	25% vervorming	ISO 3386-1	kPa	20	18	27
	50% vervorming		kPa	72	68	90
Duurzame vervorming	25%, 22h, 23°C + Relaxatie 24h, 23°C	ASTM D 1667	%	30	26	10
Treksterkte		ISO 1798	kPa	310	220	600
Rek bij breuk		ISO 1798	%	200	240	200
Balance-pad Blauw/Lava	Lengte	mm	480 ± 30			
	Breedte	mm	400 ± 20			
	Dikte	mm	60 ± 5			
	Gewicht	kg	0,795			
Balance-pad Elite Lava/Blauw/Kiwi/Pink	Lengte	mm	480 ± 30			
	Breedte	mm	400 ± 20			
	Dikte	mm	60 ± 5			
	Gewicht	kg	0,795			
Balance-beam Blauw/Lava	Lengte	mm	1600 ± 50			
	Breedte	mm	240 ± 20			
	Dikte	mm	60 ± 5			
	Gewicht	kg	1,200			
Balance-pad XLarge Lava/Blauw	Lengte	mm	980 ± 30			
	Breedte	mm	410 ± 20			
	Dikte	mm	60 ± 5			
	Gewicht	kg	1,430			
Balance-pad Mini Lava	Lengte	mm	410 ± 30			
	Breedte	mm	250 ± 20			
	Dikte	mm	60 ± 5			
	Gewicht	kg	0,398			
Balance-pad Solid Koningsblauw	Lengte	mm				460 ± 30
	Breedte	mm				410 ± 20
	Dikte	mm				50 ± 5
	Gewicht	kg				0,993
Balance-pad Cloud Rood	Lengte	mm			480 ± 30	
	Breedte	mm			400 ± 20	
	Dikte	mm			60 ± 5	
	Gewicht	kg			0,795	
Balance-pad Cloud Olijfgroen	Lengte	mm			480 ± 30	
	Breedte	mm			400 ± 20	
	Dikte	mm			60 ± 5	
	Gewicht	kg			0,795	
Balance-beam Mini Blauw	Lengte	mm	410 ± 30			
	Breedte	mm	240 ± 20			
	Dikte	mm	60 ± 5			
	Gewicht	kg	0,300			

* De opgegeven waarden zijn typerend voor materialen met een gemiddelde dichtheid. De gegevens in deze publicatie zijn naar ons beste weten gebaseerd op de nieuwste stand van de techniek en de wetenschap. Er wordt echter geen garantie gegeven voor de juistheid van de gegevens en voor de resultaten die voortvloeien uit het gebruik ervan.

Alle afmetingen zijn bij benadering. Het betreft gemiddelde waarden met toleranties als gevolg van normale productieschommelingen en verschillen in hoogte boven zeeniveau en kamertemperatuur.

Eigenschappen

De AIREX[®]-zachtschuimsoorten met gesloten cellen nemen geen water op en behouden hun drijfvermogen in het water. **Let op: niet gebruiken als zwem- of reddingshulpmiddel!**

Bij deze uiterst robuuste en slijtvaste materialen treedt er bij langdurige drukbelasting in de afzonderlijke cellen echter drukverlies op (vergelijkbaar met een ballon). Hierdoor ontstaan er drukplekken, die zich over het algemeen echter langzaam weer terugtrekken. AIREX[®]-zachtschuim is voorzien van een antibacteriële werkstof en biedt daardoor een permanent effectieve bescherming tegen bacteriën en schimmel.*



HINWEIS!

* De antimicrobiële Sanitized[®]-hygiënefunctie die in onze balanstrainers is geïntegreerd, beschermt het materiaal tegen geurtjes, bacteriën en schimmel. Bevat een biocide met de werkzame stof folpet. Concentratie: 0,1–0,2% per productgewicht

Onderhouds- en reinigingsinstructies

De AIREX[®]-pads zijn volledig onderhoudsvrij en vereisen geen speciale onderhoudsmaatregelen. Om de levensduur en de optimale werking van het product te garanderen, dient u echter enkele eenvoudige onderhoudsinstructies in acht te nemen.

Optiek

Bij deze zeer zachte producten staat functionaliteit voorop. Het speciale productieproces zorgt voor de zachte en soepele eigenschappen. Daardoor kunnen kleine luchtbelletjes, gaatjes, maatverschillen of lichte verkleuringen voorkomen. Deze hebben geen invloed op de werking van de pad.

Reiniging & desinfectie

Spoel de Pads na gebruik af met schoon water, schud overtollig water eraf en laat ze aan de lucht drogen. Droog ze niet op of boven een radiator, omdat hierdoor drukplekken kunnen ontstaan. Verwijder vuil zo nodig met een zachte borstel en lauw zeepwater.

Vlekken en soortgelijke verontreinigingen mogen niet worden behandeld met benzine of vlekverwijderaars.

Gebruik voor desinfectie uitsluitend een alcoholvrij desinfectiemiddel, bijvoorbeeld NOVADEST FRESH S. Sterilisatie met hete stoom (autoclaaf) of heet water is niet toegestaan.

Opslag

Bewaar de AIREX[®]-pad liggend, bij voorkeur in de originele verpakking. Plaats geen voorwerpen langdurig op de pad en vermijd drukbelasting langer dan 12 uur. Opgevouwen of geknikt bewaren kan blijvende drukplekken veroorzaken. Langdurige opslag in water en directe blootstelling aan zonlicht verkorten de levensduur en kunnen het oppervlak broos en stijf maken.

Hergebruik

De pad kan op elk moment, ook na langdurige opslag, weer worden gebruikt, mits de onderstaande punten in acht worden genomen:

- Controleer de pad op scheuren of andere beschadigingen die de veiligheid tijdens het gebruik in gevaar kunnen brengen;
- Zorg ervoor dat de pad zijn oorspronkelijke vorm en stabiliteit heeft behouden om de gewenste trainingskwaliteit te garanderen;
- Reinig de pad voor gebruik om vuil of stof te verwijderen;
- De pad moet volledig droog zijn, vooral als deze eerder met water is gereinigd.

Afvalverwerking

Houd bij het afvoeren van verpakkingsmateriaal en producten rekening met het milieu en informeer bij uw gemeente naar de mogelijkheden voor milieuvriendelijke verwijdering via de daarvoor bestemde inzamelpunten.

AIREX® “Pads” bestaan uit zacht schuim op basis van gesloten-cellig polyvinylchlorideschuim (PVC) en worden geëxpandeerd met een stikstof afscheidend chemisch drijfgas. **Het materiaal bevat geen ftalaten en geen latex.**



Aanvullende opmerkingen

Garantie & aansprakelijkheid

In aanvulling op de algemene voorwaarden biedt Airex AG voor alle AIREX®-Pads de wettelijk voorgeschreven garantie, tenzij hieronder anders is bepaald.

Beperking van aansprakelijkheid

Aanspraken wegens schade aan de AIREX®-pad als gevolg van oneigenlijk gebruik zijn uitgesloten.

Aanspraken op schadevergoeding zijn uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder bij schending van contractuele verplichtingen of onrechtmatige daad. Dit geldt niet wanneer aansprakelijkheid op grond van dwingend recht verplicht is, in het bijzonder:

- in geval van opzet of grove nalatigheid;
- bij letsel aan leven, lichaam of gezondheid;
- op grond van de wet op de productaansprakelijkheid of;
- bij andere schendingen van wezenlijke contractuele verplichtingen;

In dat geval is de schadevergoeding beperkt tot de redelijkerwijs te verwachten schade.

LET OP: Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het combineren van onze producten met producten of materialen van derden.

Resterende risico's / bekende interacties

De fabrikant heeft tot nu toe slechts enkele (< 5) specifieke meldingen ontvangen over negatieve bijwerkingen in verband met het gebruik van het product. Toch kunnen er bij het gebruik van de pad in theorie allergische reacties optreden, met name bij personen met een gevoelige huid of bepaalde materiaalallergieën.

Mogelijke symptomen zijn huiduitslag, jeuk, tranende ogen of roodheid. Gebruikers die dergelijke symptomen ervaren, wordt aangeraden het gebruik onmiddellijk te staken en indien nodig een arts te raadplegen.

Huiduitslag	- Het product is vervaardigd van PVC;	Aanvaardbaar
Huidroodheid	- Het product bevat een biocide met de werkzame stof folpet (N-(trichloormethylthio)ftalimide), producttype PT09.	
Jeuk		
Tranende ogen		

De fabrikant raadt bovendien aan om vóór het eerste gebruik een huidverdraagzaamheidstest uit te voeren en de “Pads” regelmatig met zeepwater te reinigen om het risico op huidirritaties tot een minimum te beperken.

Bovendien kan het gebruik van een katoenen handdoek als onderlegger het risico op mogelijke huidirritaties aanzienlijk verminderen.

Contact




Airex AG
Industrie Nord 26
CH-5643 Sins
Zwitserland
Tel.: +41 (0)41 789 66 66
E-mail: info@my-airex.com
www.my-airex.com



Bodybow Healthcare BV
Sportlaan 14
4131 NN Vianen
Nederland
Tel.: + 31 630 52 84 71
E-mail: info@bodybow.nl
www.bodybow.nl

HINWEIS!

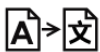

Airex AG
CH-5643 Sins

Deze gebruiksaanwijzing is momenteel beschikbaar in dertien talen: Duits, Frans, Italiaans, Engels, Fins, Noors, Zweeds, Sloveens, Pools, Turks, Litouws, Lets en Nederlands.

AIREX®



Airex AG
Industrie Nord 26
CH-5643 Sins / Zwitserland



EU-REP: 3A Composites GmbH
Kiefernweg 10
DE-49090 Osnabrück / Duitsland